Instrukcja przeprowadzenia testu skuteczności sterylizacji

Ważne informacje:
Wynik badania zostanie przesłany drogą mailową nie wcześniej niż w dniu zakończenia posiewu przez laboratorium – 7 dni.
Przed oddaniem próbek do laboratorium, pracownik firmy Eprus sprawdza jedną z trzech próbek czy nie jest ona spalona by nie obciążać klienta kosztami badań laboratoryjnych które w przypadku spalonych próbek, zostaną zaliczone jako wynik negatywny. Otwarta próbka nie zostanie poddana badaniu.
Wysterylizowane wskaźniki należy dostarczyć do 48h od zakończenia procesu sterylizacji do firmy Eprus. Jeżeli korzystają Państwo z usług kurierskich do dostarczenia próbek, należy pamiętać, aby wysłać je w dniu sterylizacji. Dlatego zalecamy:

- dzień wcześniej zamówić kuriera po odbiór przesyłki
- w dniu wysyłki wykonać proces sterylizacji
- wysyłki można realizować od poniedziałku do środy
- próbki otrzymane w piątki, zostaną odrzucone

Proces sterylizacji przebiega poprawnie w różnych czasach dla poniższych urządzeń:
STERYLIZATOR Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA – urządzenia z wbudowanym wentylatorem.
Czas sterylizacji wynosi: dla 170°C – nie krócej niż 60 minut

STERYLIZATOR Z GRAWITACYJNYM OBIEGIEM POWIETRZA – urządzenia bez wewnętrznego wentylatora
Czas sterylizacji wynosi: dla 170°C – nie krócej niż 100 minut

Czas procesu sterylizacji należy odliczać od momentu osiągnięcia żądanej temperatury

Proces sterylizacji:

1. Przygotuj do badania: Sporal S, 3 zlewki, 4 kawałki folii aluminiowej, woreczek strunowy, kopertę zwykłą oraz tekturową, marker (Rys. 1).




Rys. 1

2. Otwórz opakowanie Sporal S i wyjmij jego zawartość (bibułki). **Bibułki są złożone i nie wolno ich rozkładać!** (Rys. 2).



Rys 2

3. Zwiń każdą z nich w folię aluminiową i opisz kolejno: nr 1, 2, 3 oraz „K” dla próby kontrolnej (Rys. 3).

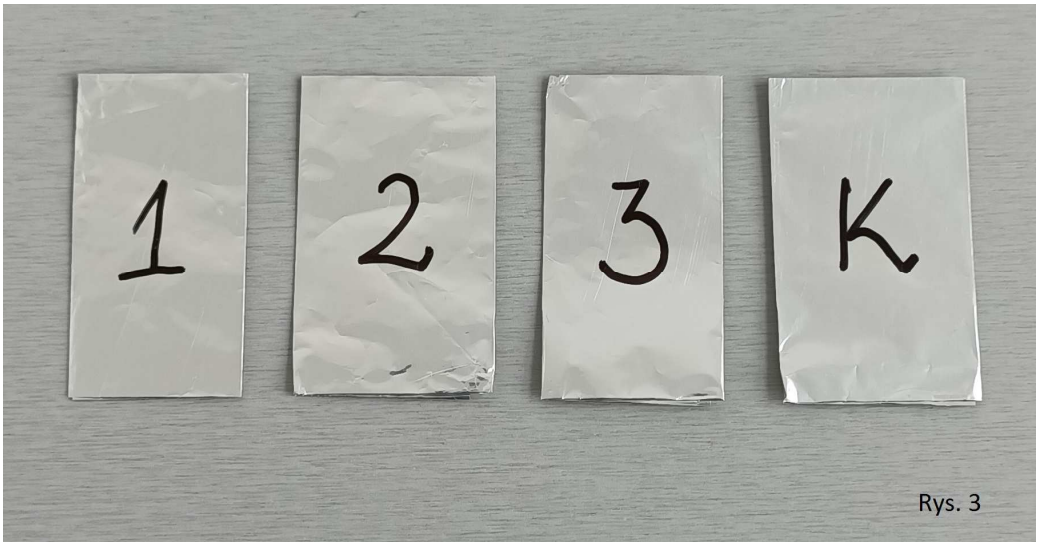

Rys. 3


4. Włóż test 1, 2, 3 do osobnych zlewek i wstaw do urządzenia według lokalizacji:

Urządzenia z jedną półką (jedna półka i dno urządzenia):

- **test kontrolny** – testowy, pozostawiamy go obok urządzenia, nie sterylizujemy
- **test nr 1** – półka górna lewa strona (3-5 cm od ścianek)
- **test nr 2** – półka górna prawa strona (3-5 cm od ścianek)
- **test nr 3** – dno urządzenia centralnie

Urządzenia z 2 półkami (dwie półki i dno urządzenia):

- **test kontrolny** – testowy, pozostawiamy go obok urządzenia, nie sterylizujemy
- **test nr 1** – półka górna centralnie
- **test nr 2** – półka górna centralnie
- **test nr 3** – półka dolna centralnie

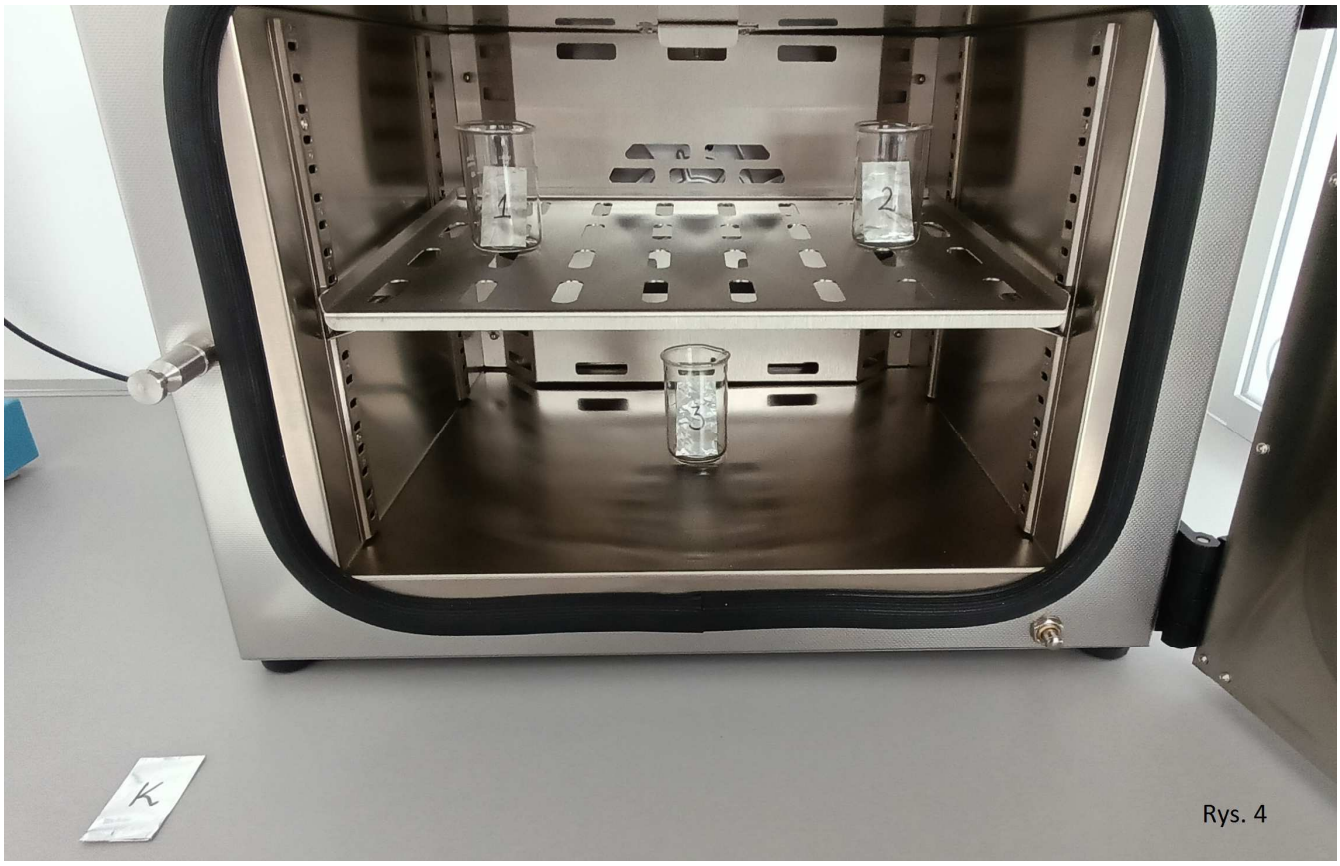


Rys. 4

5. **Zamknij kominek w urządzeniu** i uruchom proces sterylizacji. Gdy urządzenie nie ma wbudowanego programu, pamiętaj by nastawić dłuższy czas niż właściwy proces sterylizacji by zachować czas ekspozycji wsadu dla określonej temperatury.

6. Po zakończonej sterylizacji poczekaj na ostudzenie urządzenia.

7. Wyciągnij testy 1, 2, 3 ze zlewek i włóż je wraz z testem „K” do woreczka strunowego. Możesz również dołączyć opakowanie po Sporalu S (Rys. 5).

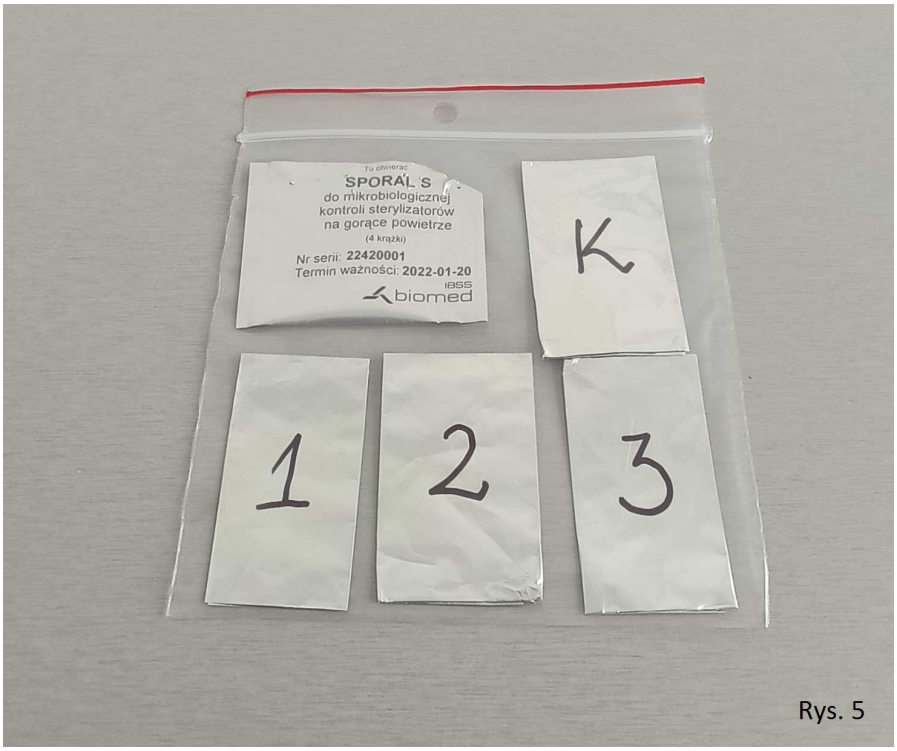

Rys. 5

8. Wypełnij dokument Zlecenie badania biologicznego wskaźnika Sporal S ze sterylizacji suchym gorącym powietrzem (**ważne** – zapisz numer seryjny oraz datę ważności z opakowania Sporal S).

9. Włóż woreczek strunowy z testami do zwykłej koperty, a następnie z wypełnionym dokumentem do koperty tekturowej (Rys. 7 i 8).



Rys. 7



Rys. 8

10. Zamów kuriera po odbiór paczki. Ważne, by próbki **jak najszybciej** trafiły do badań.
Adres do wysyłki:
Eprus – serwis
43-300 Bielsko-Biała
ul. Leszczyńska 32
tel. 33/497 73 70

Próbki otrzymane w piątki oraz powyżej 48h od wykonania badania zostaną odrzucone.